


CEMENTO DE RESINA ADHESIVA DE CURADO DUAL

ESTECER*Plus*




Procedimiento Simple & Versátil • Adhesión Confiable • Estética Superior

Procedimiento. ESTECER Plus necesita almacenamiento entre 0~10°C de temperatura y se recomienda retirar de la refrigeración 20 minutos antes de su uso.

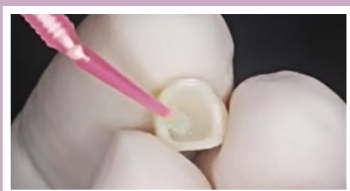

1. Realiza la preparación de la restauración y el diente como lo plantea el protocolo de adhesión de tu elección

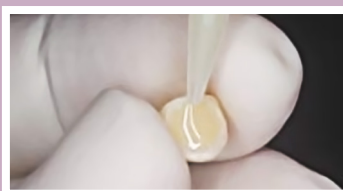

2. Aplica ESTECER Plus en la superficie de la restauración



3. Coloca la restauración en el diente con presión firme



4. Fotocura el exceso de ESTECER Plus por 2 ~ 4 segundos



5. Elimina el exceso del material para cementado



6. Endurecimiento final de la pasta mediante fotocurado durante 20 segundos o más. Fotocurar a lo largo de los márgenes durante 20 segundos o más en caso de restauraciones no translúcidas.




7. Realiza el terminado de tu restauración


Optimizado para una estética duradera.

ESTECER Plus está diseñado para ofrecer alta resistencia a la flexión derivado de su relleno de silicio y zirconio, excepcional absorción de agua y estabilidad de color. Estas características permiten lograr una estética duradera y confiable.

Resistencia a la flexión

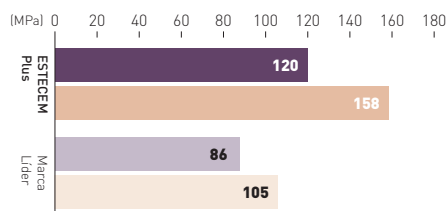

Adsorción de agua

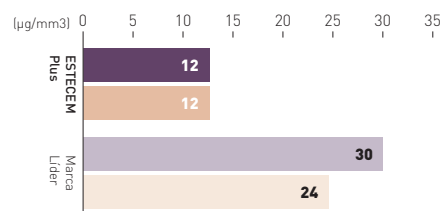

Estabilidad del color del cemento

Tono	Antes de la prueba	Después de sumergirse en solución de café (80°C / 24 hrs.)	ΔE
ESTECER Plus	Universal		4.6
Marca Líder	A1		8.8

Complementa tu técnica de cementado.

ESTECER Plus tiene la pareja ideal para generar un sistema de cementado verdaderamente exitoso: Palfique Universal Bond.

Palfique Universal Bond promueve la adhesión de Estecem Plus tanto a la estructura dental como a todos los materiales protésicos sin la necesidad de usar un primer previo.




Presentación.



ESTECER Plus Jeringa Dual
Contenido:
1 jeringa dual A/B 2.3 ml c/u (4.7 g)

Tonos disponibles:
Universal, Translúcido,
Blanco opaco

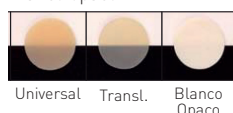

Palfique Universal Bond Kit

Contenido:
PALFIQUE UNIVERSAL BOND A / 1x 5 ml
PALFIQUE UNIVERSAL BOND B / 1x 5 ml
Microaplicadores desechables / 25x
Godete de plástico / 1x
Godetes desechables / 5x

Manufacturado por



38-9, Taitou-ku, Tokyo, Japan
Tel.: +81-3-3835-2261 Fax.: +81-3-3835-7224
eMail: export@tokuyama-dental.com.jp URL: www.tokuyama-dental.com

Importado por:



Tajín 110, Col. Narvarte, C.P. 03320,
Benito Juárez, México D.F.
Tel. 55 5672 2830
Lada sin Costo 01800 111 2257