

Sellador protector para el tratamiento de la dentina hipersensible

TOKUYAMA SHIELD FORCE *PLUS*



- + Tratamiento rápido y efectivo al problema de la dentina hipersensible
- + Efecto de sellado superior
- + Efecto de recubrimiento durable
- + Procedimiento sencillo

¡Protección al problema de la hipersensibilidad dentinaria!

Mecanismo de dentina hipersensible


Una de las teorías nos dice que la hipersensibilidad dentinaria es causada por el movimiento rápido del líquido en los túbulos dentinarios.




Sellando los túbulos con TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS

La aplicación de TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS penetra y sella los túbulos dentinarios expuestos inhibiendo el flujo de fluido a través de los mismos lo que es la causa de la sensibilidad.

Sellado con capas de resina

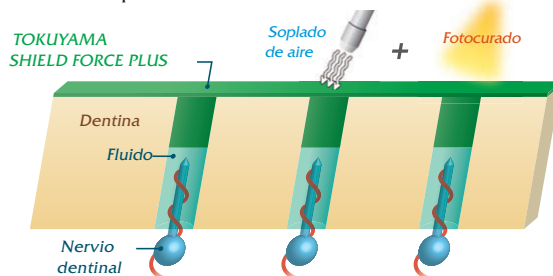

Láminas de resina firmemente formadas en los túbulos dentinarios.

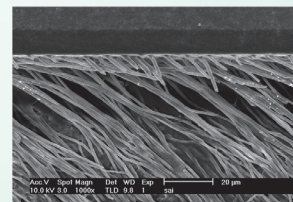


SEM imagen - Mag X 1000

**datos internos, R&D, Tokuyama Dental Corporation. Nota: este es un modelo de prueba demostrando una dentina hipersensible


Tratamiento rápido y efectivo al problema de dentina hipersensible

TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS reduce la hipersensibilidad dentinal inmediatamente después de su aplicación, el monómero autoreforzado **Monómero SR™**, tecnología patentada por Tokuyama, interactúa con los iones de calcio que sellan los túbulos dentinarios. El secado con aire garantiza la formación de una fina capa de resina protectora sobre la superficie y los túbulos dentinarios, finalmente el fotocurado asegura el producto solidificándolo.


Procedimiento clínico y diagrama esquemático de la tecnología de autoreforzo

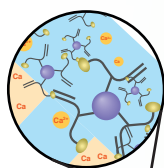


El Monómero SR reacciona con los iones de calcio

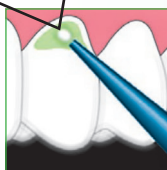


Aplicar Tokuyama Shield Force Plus y dejar por 10 seg.

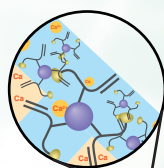


La resina forma una capa después del secado de aire para eliminar solvente y agua

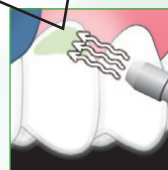

Posteriormente aplicar aire débil por 5 seg + aire fuerte por 5 seg.

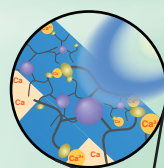

La capa de resina se polimeriza a través del fotocurado

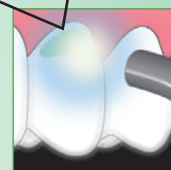


Fotocurado por 10 seg.

Efecto de sellado superior

Cuando se usa en casos clínicos para restauraciones directas/indirectas, TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS, ayudará a aliviar y a prevenir la sensibilidad dental causada por el agua fría y la presión del aire, simultáneamente protegerá la dentadura de bacterias y de contaminación inesperada en la dentina. Gracias a su efecto de sellado superior, TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS, también ayudará contra la sensibilidad postoperatoria.

Tokuyama Shield Force Plus

Protección contra el agua fría y/o presión de aire

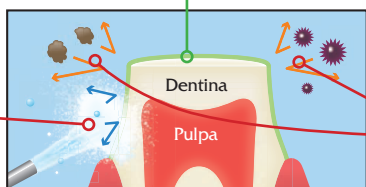

Protege contra la contaminación ya que inhibe la adhesión de bacterias y contaminantes

Efecto de recubrimiento duradero

TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS es efectivo en la reducción de la abrasión y la erosión de la dentina cervical expuesta al crear una capa de revestimiento duradero por medio del fotocurado. Gracias al **Monómero SR**, se ha demostrado una gran durabilidad contra la abrasión por el cepillado de dientes aún cuando la capa que se forma es muy delgada.

Prueba de abrasión con el cepillado de dientes



Presentación disponible



TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS

Refill

- Botella/3ml x 1

Las especificaciones están sujetas a cambios sin la obligación de parte del fabricante

Manufacturado por

Tokuyama Dental Corporation

38-9, Taitou 1-Chome, Taitou-ku, Tokio Japón
Tel: +81-3-3835-226 Fax: +81-3-3835-7224
email: export@tokuyama-dental.co.jp
URL: www.tokuyama-dental.com

Importado por:

Balsas DENTAL

Innovación, Calidad y Servicio... compromiso de Satisfacción.

Tajín 110 Col. Narvarte C.P. 03320, Benito Juárez, México D.F.
Tel. 01 (55) 5672 2830 Lada sin Costo 01800 111 2257
www.balsasdentalmx.com