




PALFIQUE UNIVERSAL FLOW

Material restaurador dental a base de resina



Propiedades Físicas

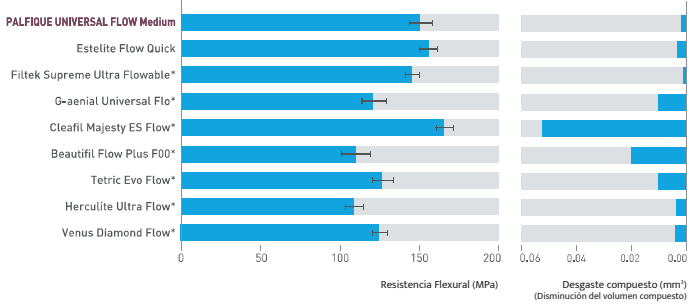

*No es una marca registrada de Tokuyama Dental Corporation

Excelente Estética

Una combinación de colores amplia y natural

PALFIQUE UNIVERSAL FLOW está diseñado básicamente para hacer posible que la mayoría de los casos puedan restaurarse con un solo tono, gracias a su excelente efecto de adaptabilidad cromática.





La compatibilidad de colores del tono A2 cuando se rellena en cada diente artificial (B1, A1, B2, A2, C1, A3) se altera creando una cavidad de 4 mm de diámetro y 2 mm de profundidad. Mediante el uso de luz negra se puede ver la fluorescencia de PALFIQUE UNIVERSAL FLOW donde se llenó.



Alta difusión de luz


PALFIQUE UNIVERSAL FLOW tiene la mayor difusión de luz mediante prueba de transmisión láser. En clínica puede ser posible lograr una amplia combinación de colores y un margen invisible.

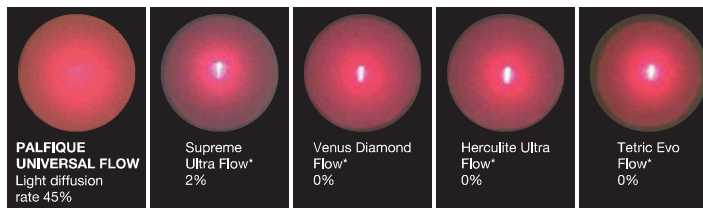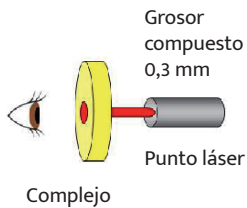

Componentes de relleno

PALFIQUE UNIVERSAL FLOW se compone de relleno supranano esférico (200 nm, relleno de sílice-zirconia) y relleno compuesto de forma redonda (incluye relleno supranano esférico).


La adopción de ambos rellenos puede contribuir a las propiedades estéticas (amplia combinación de colores, excelente capacidad de pulido) y a las propiedades de manipulación (fácil extrusión, no pegajoso).

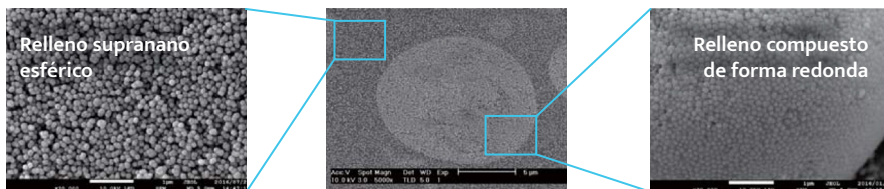

Super Low



Fluidez

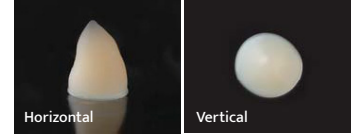


Cavidades Recomendadas




Medium



Fluidez

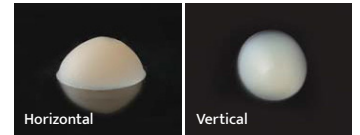


Cavidades Recomendadas

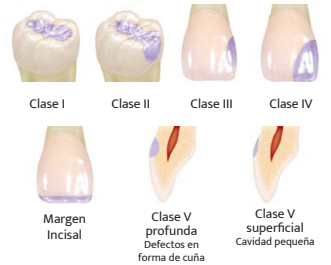

High



Fluidez

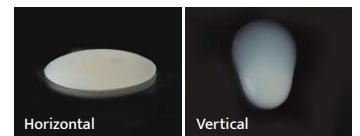

Cavidades Recomendadas



Importado por Balsas División Dental
Tajín 110 Col. Narvarte, Benito Juárez, México D.F.
Tel. 01 (55) 5672 2830 Lada sin Costo 01 800 111 2257

BalsasDentalmx
 balsasdentalmx