

Adhesivo Autograbable de Un Solo Paso PALFIQUE BOND



ADHESIÓN ESTÉTICA Y CONFIABLE

El **Monómero SR**, con tecnología de autorefuerzo 3D, desarrollado por Tokuyama Dental, crea una capa de adhesión integral y uniforme. **PALFIQUE Bond** emplea el **Monómero SR** para proporcionar una adhesión fuerte y durable y al mismo tiempo reduce la sensibilidad postoperatoria. Esta es la ventaja de utilizar el sistema de adhesión autograbable de un solo paso el cual emplea **Monomero SR**. **PALFIQUE Bond**, le ofrece a tu práctica una adhesión estética y confiable.

Características

PALFIQUE Bond tiene mejores prestaciones, con la misma fuerza de unión que el original **TOKUYAMA BOND FORCE**.

- Reducción del tiempo de aplicación a 10 segundos.
- Reducción de secado por aire a 5 segundos.
- Posibilidad de almacenar a temperatura ambiente (0 - 25°C) °hasta por 2 años
- Tiempo trabajo de 5 min. bajo placa de bloqueo de luz

Pasos Simples



Preparación limpia y seca.



Aplicar PALFIQUE Bond y dejar por 10 seg.



Posteriormente aplicar aire moderado por 5 seg.




Fotocurado por 10 seg.



Restauración final


Caso cortesía del Dr. Kazunori Otani

Fuerza de unión asegurada (fuerte y durable)

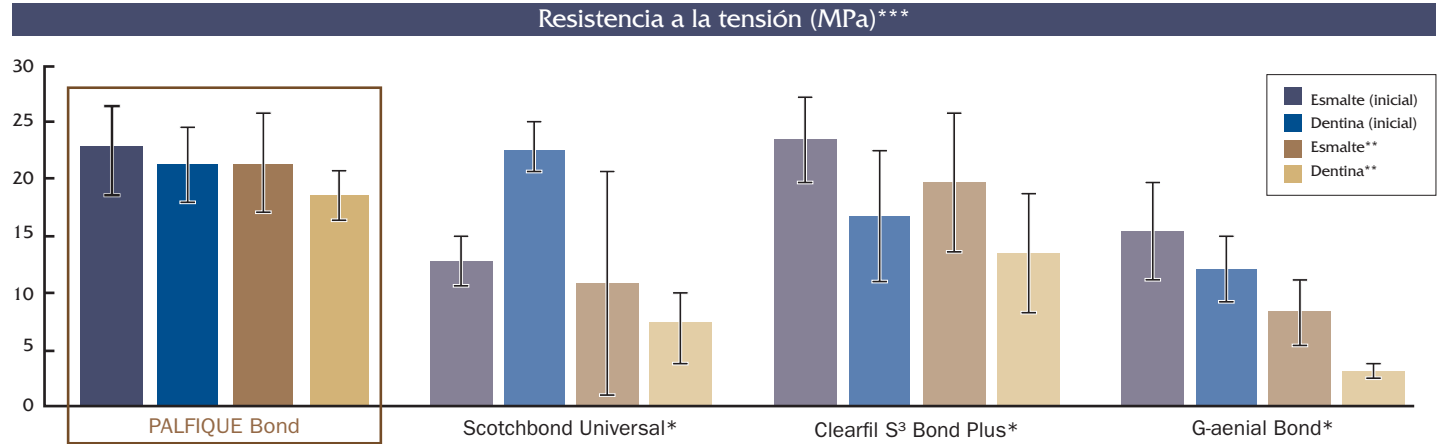

Capa de adhesión uniforme, delgada y fuerte

PALFIQUE Bond proporciona una capa de adhesión uniforme, delgada y fuerte, la cual se adapta excelentemente a la cavidad.

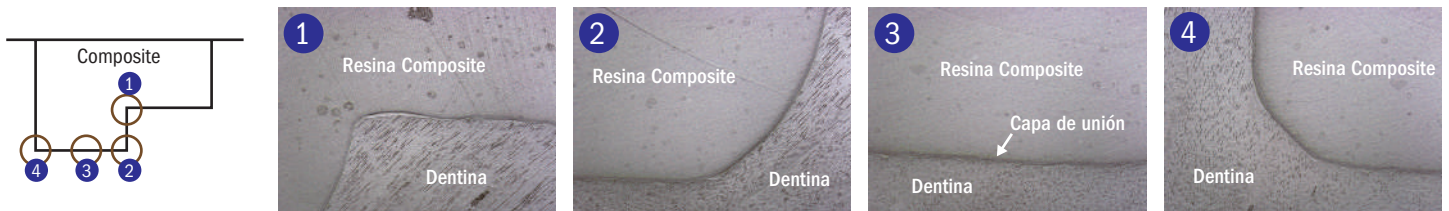

Presentación disponible



PALFIQUE BOND **Refill**
- Botella/5ml x 1

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin la obligación de parte del fabricante

Manufacturado por

Tokuyama Dental Corporation

38-9, Taitou 1-Chome, Taitou-ku, Tokio Japón
Tel: +81-3-3835-226 Fax: +81-3-3835-7224
email: export@tokuyama-dental.co.jp
URL: www.tokuyama-dental.com

Importado por:

Balsas DENTAL
Innovación, Calidad y Servicio... compromiso de Satisfacción.

Tajín 110 Col. Narvarte C.P. 03320, Benito Juárez, México D.F.
Tel. 01 (55) 5672 2830 Lada sin Costo 01800 111 2257
www.balsasdentalmx.com