

PALFIQUE UNIVERSAL BOND



ADHESIVO UNIVERSAL DE AUTOCURADO

PALFIQUE UNIVERSAL BOND es un sistema adhesivo para restauraciones directas e indirectas y puede ser usado con todas las técnicas de autograbado, grabado selectivo y grabado total.


Como un adhesivo universal, **PALFIQUE UNIVERSAL BOND** ha sido diseñado para ser totalmente compatible con materiales de fotocurado, autocurado y curado dual; su **Tecnología BoSE** potencializa la actividad catalítica lo que permite una rápida polimerización y curado en su interfaz adhesiva (curado por contacto) al entrar en contacto con materiales de resina.

PALFIQUE UNIVERSAL BOND también mejora la fuerza de adhesión entre materiales resinosos polimerizables y todo tipo de materiales de restauración indirecta.


Todos los PROCEDIMIENTOS

Palfique Universal Bond necesita almacenamiento entre 0~10°C de temperatura y se recomienda retirar de la refrigeración 20 minutos antes de su uso.

Restauraciones directas y reparaciones intraorales con resina compuesta.

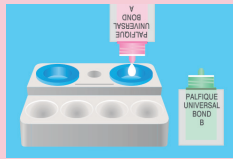

Dispensar una gota de cada botella A y B y mezclar.
Tiempo de mezcla: 1 minuto

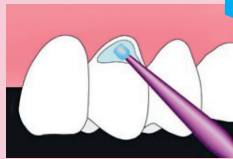


Aplicar el adhesivo mezclado.
Tiempo para aplicación: 3 minutos máximo después de la mezcla

No necesitas esperar




Secar con aire.
Tiempo de secado: 30 seg.

No necesitas fotocurar *

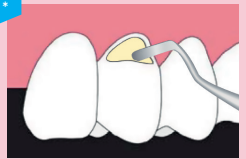

Restaurar con resina compuesta

Cementación y restauraciones indirectas.

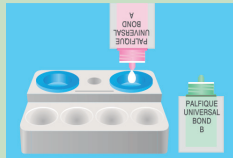

Dispensar una gota de cada botella A y B y mezclar.
Tiempo de mezcla: 1 minuto.




Aplicar el adhesivo mezclado a la restauración y al diente.
Tiempo para aplicación: 3 minutos máximo después de la mezcla



Secar con aire.
Tiempo de secado: 30 seg.

No necesitas esperar

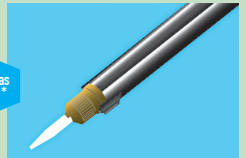

Cementar

* Gracias a su Tecnología BoSE, Palfique Universal Bond No requiere fotocurado.

Todas las TÉCNICAS

Compatibilidad con todas las técnicas de grabado.

Palfique Universal Bond se puede utilizar con técnicas de autograbado, grabado selectivo y grabado total.

Compatibilidad con todos los materiales de composite.

Palfique Universal Bond es compatible con materiales de composite fotopolimerizables, de curado dual y autopolimerizables para todo tipo de restauraciones directas e indirectas sin necesidad de un activador adicional.

Presentación Disponible:




PALFIQUE UNIVERSAL BOND Kit

Contenido:
PALFIQUE UNIVERSAL BOND A / 1x 5 ml
PALFIQUE UNIVERSAL BOND B / 1x 5 ml
Microaplicadores desechables / 25x
Godete de plástico / 1x
Godetes desechables / 5x


Todos los MATERIALES

El PALFIQUE UNIVERSAL BOND se adhiere a cualquier material y a cualquier diente sin necesidad de primers adicionales.


Cerámico

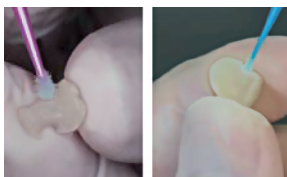


Resistencia de unión al desprendimiento con Disilicato de litio (IPS e-max)

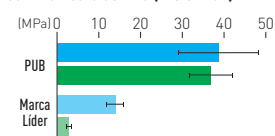


Zirconia

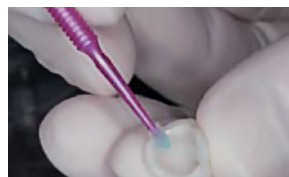


Resistencia de unión al desprendimiento con Zirconia

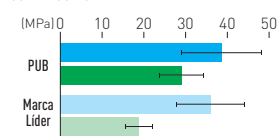


Composite

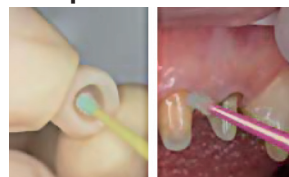


Resistencia de unión al desprendimiento con Resina Indirecta

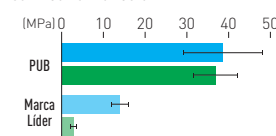

Metales preciosos y no preciosos

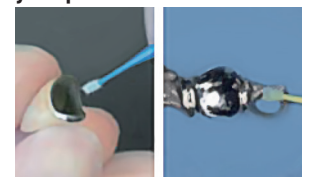

Resistencia de unión al desprendimiento con Metales Preciosos

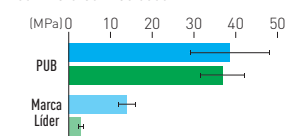

Manufacturado por:

Tokuyama Dental

38-9, Taitou-ku, Tokyo, Japan
Tel.: +81-3-3835-2261 Fax.: +81-3-3835-7224
www.tokuyama-dental.com

Importado por:

BalsasDentalmx
balsasdentalmx

Balsas DENTAL

Tajín 110, Col. Narvarte, C.P. 03320,
Benito Juárez, México D.F.
Tel. 55 5672 2830
www.tokuyama.mx